


## FIT-SCREENING - DÉPISTAGE DU CANCER COLORECTAL

### INSTRUCTIONS DE PRÉLÈVEMENT



1  
 Écrire sur le tube de prélèvement :  
 N Nom et prénom  
 A Date de naissance  
 D Date de prélèvement

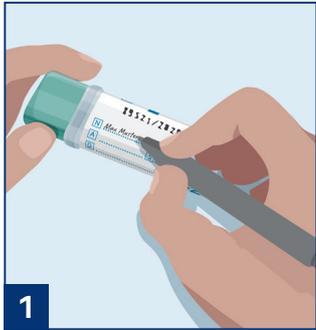

2  
 Placez le papier de collecte dans la cuvette de toilette. Déposez l'échantillon de selles sur le dessus du papier.




3  
 Ouvrez le tube de prélèvement en tournant et tirant légèrement le capuchon vert lié au bâtonnet de test.



4  
 Collectez un échantillon en grattant sur la surface des selles avec l'embout du bâtonnet vert.



5  
 La partie rainurée doit être complètement recouverte de selles. Ne pas trop remplir. Une petite quantité d'échantillon est suffisante.

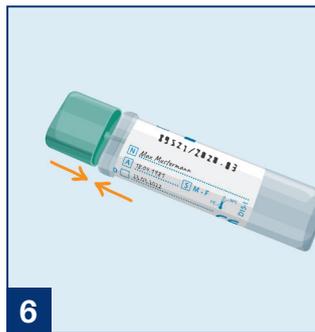

6  
 Insérez le bâtonnet dans le tube et fermez-le en cliquant fermement sur le capuchon vert. Ne pas répéter le prélèvement!



7  
 Agitez vigoureusement le tube et placez le dans le sac vert (protégé de la lumière).



8  
**Glissez le sachet plastique ainsi que le formulaire de demande d'analyse**

complété par votre médecin dans l'enveloppe préaffranchie et renvoyez-la le même jour ou le lendemain par poste. Vous pouvez également déposer le sachet dans un de nos centre de prélèvement ou au laboratoire MEDISYN le plus proche\*.

\*La liste de tous les centres de prélèvements et laboratoires MEDISYN est disponible à l'adresse [www.medisyn.ch](http://www.medisyn.ch)

